

N5A Nazal Maskesi

Kullanım Kılavuzu

İçindekiler

N5A Nazal Maskesi.....	1
Kullanım Amacı.....	1
Endikasyonlar	1
Maskesini Kullanmadan Önce.....	2
Maske Parçaları.....	4
Maskenin takılması	5
Maskenin sökülmesi.....	6
Maskenin Evde Temizlenmesi	7
Maskenin hastalar arasında yeniden işlem görmesi.....	8
Maskenin Tekrar Monte Edilmesi.....	9
Sorun Giderme	10
Teknik Özellikler.....	11
Depolama	12
Bertaraf edilmesi.....	12
Semboller	12
Sınırlı Garanti	13

N5A Nazal Maskesi

BMC'nin N5A Nazal Maskesi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Nazal Maskesi, rahat, esnek ve sessizdir. Ciltinizle temasını en aza indirerek tasarlanmıştır, bu nedenle tedavi sırasında size rahat verecektir. Bu kullanma kılavuzu, maskenizi doğru kullanmanız için ihtiyaç duyduğunuz bilgileri sunmaktadır.

Kullanım Amacı

N5A Nazal Maskesi, Sürekli pozitif havayolu basıncı (CPAP) veya Bi-level sistemi gibi pozitif hava yolu basıncı cihazdan bir hastaya hava akımını noninvazif olarak yollıyor.

N5A Nazal Maskesi ise:

- Pozitif hava yolu basıncı tedavisi öngörölmüş yetişkin hastalar (> 66 lb / 30 kg) tarafından kullanılmalıdır.
- Ev ortamında tek hastada yeniden kullanım ve hastane / kurumsal ortamında çok hastada yeniden kullanım için tasarlanmıştır.

***DİKKAT:** ABD'de, Federal yasa, bu cihazın bir doktor tarafından satın alınması veya sipariş verilmesi sınırlandırmaktadır.*

Endikasyonlar

Bu maskesi aşağıdaki koşullardaki hastalar için dikkatle kullanılmalıdır:

- Yüz deformasyonu.
- Kullanım sırasında maskesi ile temas edecek yaralı cilt.

Maskesini Kullanmadan Önce



UYARILAR


- Havalandırma delikleri açık tutulmalıdır.
- Bu maske sadece CPAP ile yada doktor veya solunum terapisti tarafından önerilen iki seviyeli cihazlar ile kullanılmalıdır.
- Cihaz açıldığı sürece maske kullanılmamalıdır. Maske donatıldığı zaman, cihazın hava üflemesinden emin olun.

Açıklamalar: CPAP ve iki seviyeli cihazları maskenin dışında havanın sürekli akışı sağlamak için havalandırma delikleri var özel maskeler (veya konektörler)ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Cihaz açıldığında ve düzgün çalışmıyorsa, cihazdan gelen yeni hava havalandırma deliklerinden gelen dışarı solunan havayı temizler. Ancak, cihaz çalışmadığında, yetersiz temiz hava, maske yoluyla sağlanacaktır, ve üflenen hava tekrar nefes alınabilir. Solunan havanın yeniden soluklanması için birkaç dakikadan daha uzun süre gerektirebilir, bazı durumlarda, boğulmaya yol açabilir. Bu CPAP veya iki seviyeli cihazların çoğu modeller için geçerlidir.

- Silikon alerjisi olan kullanıcılar için geçerli değildir.
- Bu maske, yardımcı olmayan, donuklaşmış, tepkisiz ya da maskeyi kaldıramaz olan hastalarda kullanılmamalıdır.
- Tamamlayıcı oksijen kullanırken tüm uyarılara uyun.
- CPAP veya iki seviyeli cihaz çalışmazken, oksijen akışı kapalı olmalıdır, böylece kullanılmayan oksijen cihaz muhafaza içinde birikir ve yangın riski yaratmaz.
- Oksijen yanmayı destekler. Oksijen sigara içildiğinde veya açık alev varlığında kullanılmamalıdır. Sadece iyi havalandırılan odalarda oksijen kullanır.

- Tamamlayıcı oksijen akışı sabit bir akış hızında, inhale oksijen konsantrasyonu basınç ayarları, hasta solunum şekli, maske, uygulama noktası ve kaçak oranına bağlı olarak değişir.
- Maskenin teknik özellikleri akış jeneratör ile uyumlu olup olmadığını kontrol etmek için klinisyen sağlanmıştır. Teknik özelliklerinin ötesinde kullanılır veya uyumsuz cihazlar ile kullanılırsa, maskenin mühürü ve konforu etkili olmayabilir, optimum tedavi elde edilemeyebilir, kaçak veya sızıntı oranı değişimi, akış jeneratörü fonksiyonunu etkileyebilir.
- Maskeyi kullanırken HERHANGİ bir yan etki fark ederseniz Yüz Maskesini kullanmaya son verin ve hekiminize ya da uyku terapistinize başvurun.
- Ayarları ve operasyonel bilgileri ile ilgili ayrıntılar için CPAP veya iki seviyeli cihaz kılavuzuna başvurun.
- Maskeyi kullanmadan önce tüm ambalajı çıkarın.

Maske Parçaları

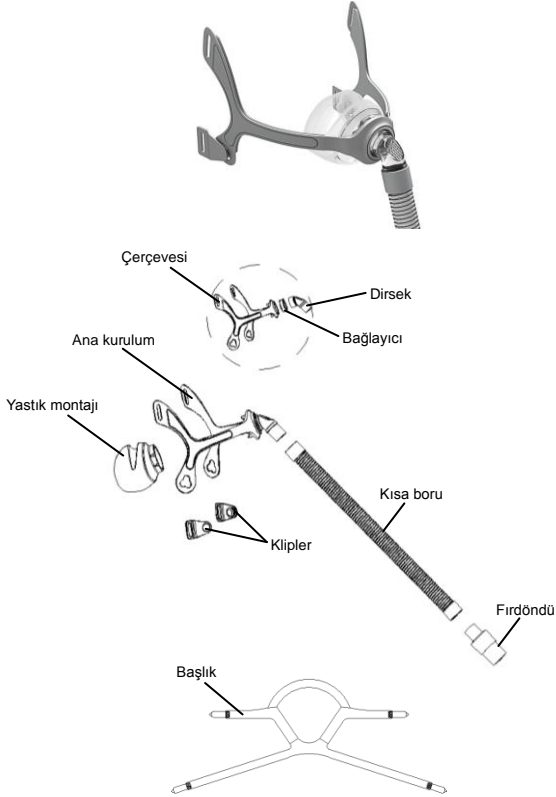

N5A Nazal Maskesi yapısı

Maskenin takılması

1



Alın çerçevesi ve kliplerin boşluklar aracılığıyla parçacığı tarafından başlık kayışları takın.

2



Maskeyi burnunuzun üzerine tutun ve başlığı başınızın üzerine çekin.

3



Kulaklarınızın aşağıya alt kayışları getirerek, ana kurulum kliplerini bağlayın.

4




Üst başlık kayışların rahat ve sağlam olduğu kadar eşit ayarlayın, ve maskeyi yeniden takın.

5



Alt başlık kayışların rahat ve sağlam olduğu kadar eşit ayarlayın, ve maskeyi yeniden takın.

6

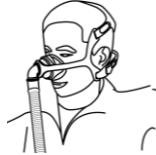


Maske gösterildiği gibi giyildikten sonra.

Maskenin sökülmesi

Not:


Ana kurulum parçalanmış olamaz.

1

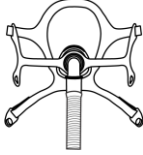


Başlık üst kısmını, çerçevesi üst kısmındaki kurulum deliğinden çıkarın.

2

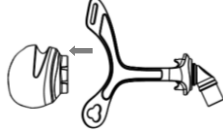

Ana kurulumundan Yastık montajı çıkarın.

3

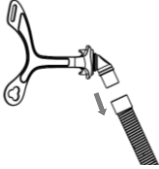

Çerçeve aksamından Kısa boru çıkarın.

Maskenin Evde Temizlenmesi

Notlar:

- *Maske ve başlık yalnızca elde yıkamayla temizlenmelidir.*
- *Başlık, klipleri çıkarmadan yıkanmış olabilir.*
- *Maskeyi yıkarken, Dirsek, ve Çerçevesi Ana kurulum düzeneğinden sökülemez.*



İKAZLAR

- Her zaman temizlik talimatlarını takip edin. Çamaşır suyu, klor, alkol, aromatikler, nemlendiriciler, antibakteriyel maddeler, ya da sistem veya hava tüpünün herhangi bir bölümünü temizlemek için kokulu yağlar içeren çözümler kullanmayın, takdirde maske zarar verebilir.
- Doğrudan güneş ışığına veya ısı sistemi veya borunun herhangi bir bölümünü ortaya koymak bozulmasına neden olabilir.
- Bileşenin herhangi bir görünür bozulma (vb, çizik, gözyaşları çatlama) olması halinde, bir bileşen atılmalı ve değiştirilmelidir.

Günlük / Her Kullanımdan sonra

- Maske bileşenlerini söküm talimatlarına göre sökün.
- Ayrılmış maske bileşenlerini (kafa teçhizatı hariç), bebek şampuanı kullanarak (örn.%1 oranında seyreltilmiş Alconox) 10 dakika süreyle ılık (yaklaşık 30°C) suyla temizleyin.
- Hava ağzını temizlemek için yumuşak tüylü bir fırça kullanın.
- Tüm bileşenleri içme suyu kalitesinde suyla durulayın ve doğrudan güneş ışığına maruz kalmayacakları bir yerde havayla kurumaya bırakın.
- Tüm bileşenler kurduğunda, yeniden birleştirme talimatlarına göre birleştirin.

Haftalık


Başlık ve tüm bileşenleri ılık sıvı deterjan (örn.%1 oranında seyreltilmiş Alconox) kullanarak ılık (yaklaşık 30°C) suyla yıkayın. Doğrudan güneş ışığı havada kurumasını bekleyin.

Maskenin hastalar arasında yeniden işlem görmesi

Bu maske başka bir hastada kullanılacaksa işleminden geçmesi gerekmektedir. Ekteki “Temizlik ve Dezenfeksiyon Talimatları” na bakın, ya da “Temizlik ve Dezenfeksiyon Talimatları” için BMC web sitesi www.bmc-medical.com.'a tıklatın. Eğer İnternet erişiminiz yok ise lütfen BMC temsilcisi ile irtibata geçin.


Maskenin Tekrar Monte Edilmesi

1

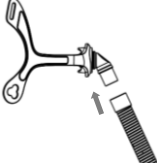


Kısa boruyu Ana kurulum takın ve Firdöndü'nün güvenilir olduğunu doğrulayın.

2

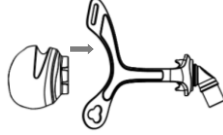

Yastık montajı ana kurulum takın ve Yastık montajı güvenilir olduğunu onaylayın.

3

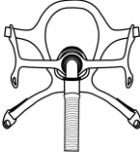


Başlık üst kısmını ana kurulum üst kısmındaki kurulum deliğine takın.

Sorun Giderme

Sorun	Muhtemel nedeni	Muhtemel çözüm
Maske sizintisizliği düzgün olamaz veya rahatsızdır.	Maske yanlış monte edilmiş veya yanlış ayarlanmış olabilir.	"Maskenin takılması" bölümündeki talimatları dikkatle uygulayın. Başlığının aşırı sıkılmadığından emin olun.
	Maske boyu yanlış.	Klinisyene danışın.
	Maske doğru sıkılır değildir.	Hem üst hem de alt başlık bantlarını sıkın.
	Minder hizalanmamış veya yüzünde kırıştırılmış durumda.	Minderi "Maskenin Tekrar Monte Edilmesi" talimatlara göre düzgün ayarlanmış olduğundan emin olun. Minder içinde hiçbir kırışıklıkların olmadığından emin olun.
	Maske minderini kirlenebilir.	"Maskenin Evde Temizlenmesi" talimatlarına göre minderini temizleyin.
Maske çok gürültülü.	Maske hatalı olarak monte edilmiştir.	Maskeyi yeniden takın.
	Delikler engellenmiş veya kısmen engellenmiş.	"Maskenin Evde Temizlenmesi" talimatlara göre minderini ve ince pedi temizleyin.

Teknik Özellikler

Basınç-Akış Eğrisi

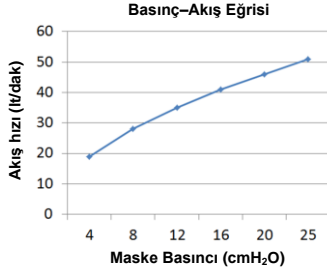

Basıncı (cmH₂O)	4	8	12	16	20	25
Akış hızı (lt/dak)	19	28	35	41	46	51

Ölü Boşluk Bilgileri

Ölü boşluk ise, Maskenin firdöndü kadar olduğu boş hacmidir.
Maskenin ölü boşluk minder boyutlarına göre değişir ama 105 mL 'den az olacaktır.

Terapi Basıncı

4 ila 25 cmH₂O.

Direnç

Ölçülen Düşme Basıncı (3 boyut için ortalama)
50 L/dk'de: 0,2 cmH₂O
100 L/dk'de: 0,8 cmH₂O

Ses

BEYAN EDİLMİŞ ÇİFT SAYISI GÜRÜLTÜ EMİSYON DEĞERLERİ ISO 4871'e uygundur. Maskenin A-ağırlıklı ses güç seviyesi belirsizliği 3 dBA ile 28 dBA arasındadır. 1 m mesafede maskenin A-ağırlıklı ses basınç seviyesi belirsizliği 3 dBA ile 20 dBA arasındadır.

Çevre Koşulları

Çalışma sıcaklığı: +5°C ila +40°C (41°F ila 104°F)
Çalışma nemi: %0 ~ %93 bağıl nem yoğuşmasız
Depolama ve taşıma: -20°C ila +55°C (-4°F ila 131°F)
Depolama ve taşıma nemi: %0 ~ %93 bağıl nem yoğuşmasız

Depolama

Maskeyi uzun süre saklamak üzere olduğunda, iyice temiz ve kuru olduğundan emin olun. Maskeyi doğrudan güneş ışığından uzak ve kuru bir yerde saklayın.

Bertaraf edilmesi

N5A Nazal Maskesi herhangi bir tehlikeli madde içermemektedir ve normal çöp olarak bertaraf edilebilir.

Semboller

Sistem ve Paketleme



Dikkat, birlikte gelen belgelere bakınız.

Uyarı veya Dikkat ve muhtemel yaralanma uyarıları size gösterir veya cihazın güvenli ve etkili kullanımı için özel önlemleri açıklıyor.



Lot numarası



Katalog numarası



Doğal kauçuk lateks ile yapılmış değil



Sıcaklık sınırlaması



Nem sınırı



Üretici



Avrupa Birliğinde Yetkili Temsilci

Sınırlı Garanti

N5A Nazal Maskesi, tüm bileşenleri, Ana kurulum, Yastık montajı, Fırdöndü, Klipler, Başlık ilk tüketici tarafından satın alınma tarihinden itibaren doksan (90) gün süreyle malzeme ve işçilik kusurlarına karşı garanti kapsamında olduğunu beyan ederiz.

Bu garanti kapsamında haklarını, yerel, yetkili satıcılara başvurun. N5A Nazal Maskesi beklenen servis ömrü bir yıldır.

ÜRETİCİ:

BMC MEDICAL CO., LTD.

Fengyu Binası Kule A Oda 110, No. 115 Fucheng Yolu, Haidian, 100036 Pekin, ÇİN HALK CUMHURİYETİ

Tel: +86-10-51663880

Fax: +86-10-51663880 Ext. 810

AB YETKİLİ TEMSİLCİSİ:

Şangay Uluslararası Holding Corp GmbH (Avrupa)

Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Almanya

Tel: 0049-40-2513175

Fax: 0049-40-255726