

KILAVUZ: Ürünlerimizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.
Ürünlerimizin size daha iyi hizmet verebilmesi, gelecekteki bakım
ve garantiyi kolaylaştırmak için lütfen kullanmadan önce talimatları
dikkatlice okuyup saklayınız.

Ultrasonik NEMLENDİRİCİ

Kullanım Kılavuzu



Modern-Sevimli-Sağlıklı

UZMAN ÖNERİSİ

Beyaz sirke veya uygun sıvıların kullanımı havadaki zararlı bakterileri
etkili bir şekilde önler ve enflüanza virüsünün yayılmasını önler.

- Lütfen hazne içerisinde deterjan vb. kimyasallar ve metal cisimler kullanmayın. Bunların kullanımı cihazın zarar görmesine sebep olacaktır.
- Su haznesi dolu iken cihazı hareket etirmeyiniz. Dolu hazneli cihazın taşıması suyun taşmasına ve cihazın zarar görmesine sebep olabilir.
- Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
- Hava nemlendirici eşya ve elektrikli cihazlardan olabildiğince uzak bir şekilde konulmalıdır.
- Lütfen cihazdan çıkan buhar doğrudan cildinize yönleştirmeyiniz.
- Cihaz uzun süreli kullanıldığında cihazı kapatarak fırı prizden çıkarın.
- Su haznesinde kalan suyu boşaltırken cihazı kapatılmalıdır. Aksi takdirde dökülen su transformatorün yanmasına ve cihazın zarar görmesine sebep olabilir.
- Su ile doldurduğunda su ıavesine gerek duymadan 7-12 saat boyunca kullanılabilir.

Güvenlik önlemleri

- Elektrik çarpması vb. tehlikelerden korunmak için fişe ıslak el ile dokunmayın.
- Cihazın devrilmesi durumunda güç kaynağını kesin.
- Cihaz çalışırken transformatöre dokunmayın.
- Elektrik çarpmasını önlemek için cihazı parçalarına ayırmadan önce güç bağlantısını kesin.
- Üretici tarafından önerilmeyen güç kablolarnı kullanmayın.

Yayın arızalarının giderilmesi

Anormal olay	Neden	Çözüm metodu
Gösterge ışığı yanmıyor, rüzgar ve buhar yok	Güç anahtarı kapalı	Fısı prizde takın, güç anahtarını açın
İşıklar yanıyor, rüzgâr ve buhar yok	Buhar ayarı yapılmamış	Buhar seviyesini anahtar ile ayarlayın
Yayılan buharla koku var	Cihaz yeni Su haznesi kirli	Su haznesini açın, su haznesi temizlendikten sonra 12 saat boyunca gölgede kalmalıdır Su haznesini değiştirin
İşıklar yanıyor, rüzgâr yok, buhar yok	Su haznesindeki su seviyesi çok yüksek	Haznedeki suyun birazını boşaltın, kapağı sıkın
Az miktarda püsürütüyor	Kireç oluşumu, kirli su veya havuzde uzun süre bekleyen su	Transformatör temizleyin Haznedeki suyu temiz su ile değiştirin

Ürün Yapısı



Temel Parametreler

Gerilim: 220V~50Hz
Güç: 25W
Hazne kapasitesi: 2.5L
Maksimum buharlaşma: 180-200ML/H
Gürültü: ≤35dB



Kolay Kullanım

Cihazı dikey konumda uygun bir alana yerleştirin, üst kapağını çıkarın, su haznesini çıkarın ve cihazın tabanının altında bulunan sünger pedini çıkarın. Direkt olarak veya su haznesini çıkararak su ekleyin, saf su veya temiz şebekesi su ekleyin. AC 220V/50Hz güç kaynağına bağlı konumdayken, "kırmızı" güç ışığı su haznesinin su haznesini doldurmaktan olduğunu belirtir. İlk "yeşil" yanmaya başladığında su haznesinin tamamen dolduğunu ve cihazın normal şekilde çalışabileceğini belirtir. Yeşil ışık yanlığında oda havasının kuruluk durumuna bağlı olarak ayar düzmesini kullanarak cihazı istediğiniz miktarda buhar üretecek şekilde ayarlayın. Cihazdaki su bittiğinde cihaz buhar üretimini otomatik olarak durdurur. Cihazda kırmızı ışık yanmaya başlar. Su bitmesi halinde cihazı kapatın ve su haznesini tekrar doldurun, daha sonra cihazı kullanmaya devam edebilirsiniz.

Su Eklenmesi



Dikkat! Buhar çıkışına su eklemeyin. Buhar çıkışından daha yüksek seviyede su eklemeyin.

Kullanım Notları

- Deformasyon ve kırçılmayı önlemek için su haznesine 40°C ve üzeri sıcaklıklarda su eklenmemelidir.
- Cihazdan çıkan suyun insan vücuduna akmasına izin vermeyin, bez yardımı ile vücuda akan suyu temizleyin.
- Kapalı ortam sıcaklığı 0°C'de olan su kullanılması durumunda su donacak sonuç olarak bilesenlerin zarar görmesine neden olacaktır.

GARANTİ BELGESİ

Değerli müşterimiz:

Şirketimizin ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz,
hakkınızı korunması için lütfen garanti belgesini saklayınız, kalite sorunları gibi durumlar için lütfen yerel şubenizle iletişime geçiniz.

İsim: _____ Modeli: _____

Satin alım adresi: _____

Telefon: _____ Satın alınma tarihi: _____

Adres: _____

Dikkat edilmesi gereken konular

- Satin alım tarihinden itibaren kullanıcılar için sunulan bir yıllık onarım hizmetinden yararlanılamak için lütfen şubenizle iletişime geçin.
- Sarf malzemeleri gibi diğer parçalar garanti kapsamında değildir.
- Bakım hizmetlerinden faydalana bilmek için garanti belgesini ve fatura vb. satın almanızı isteyen bir belge sunmanız gerekmektedir.

Garanti kapsamı dışında kalan konular

- Dikkatsiz kullanım sonucu oluşan hata veya zararlar.
- Garanti belgesinin kaybolması veya zarar görmesi.

İTHALATÇI:

ECE TİBBİ CİHAZLAR VE MEDİKAL SAN. TİC. A.Ş.

Adres: Maltepe Mah. Hastane Yolu Sok. No: 6 Zeytinburnu/İSTANBUL
Tel: 444 78 96
Web: www.respirox.com.tr
www.ecemedikal.net

MANUAL: Thank you for purchasing our product line, in order to make our products to better serve you, please read the instructions carefully before use and retain, to facilitate future maintenance and warranty.

Ultrasonic HUMIDIFIER

Instruction Manual



Fashion • LOVELY • Healthy

EXPERTS SUGGEST

Use appropriate and white vinegar or Banlangen can effectively remove the harmful bacteria in the air, and the prevention of influenza virus.

4. Please don't be metal goods, chemicals, such as detergent into the sink, otherwise, will appear the bad atomizing phenomenon.
5. The water in the water tank for a long time, that don't move, otherwise, the overflow of water transported machine will produce fault.
6. Please don't be placed in bright or air humidifier directly irradiated.
7. Don't be humidifier on the air, and as far as possible from the furniture and electrical products.
8. Please don't directly to the body flume water.
9. Is not a long time, please cut off the power, pull the plug.
10. Must not be to do with power to dump out the water remaining in the water, otherwise it sill immediately burned transducer.
11. When filled with water can be used continuously for 7-12 hours, not need of adding water.

Safety precautions

1. Please do not use wet hand to pull the plug, so as to avoid electric shock hazard.
2. Body tilt, please cut off the power supply, for further processing.
3. Start, don't touch the transducer, otherwise, will make you pain.
4. Did not cut off the power before, should not be decomposed body, do as to avoid the electric shock accident.
5. That no unauthorized replacement of power line.

Common fault treatment

Abnormal phenomenon	Reason	Processing method
Indicator light does not shine no wind, no fog	At the end of open power switch	Plug the power plug Turn on the power switch
Bright lights, there is no fog wind	To regulate the switch open	To adjust fog quantity switch
Spray fog has peculiar smell	The new machine The water tank is not clean	Open water tank, water tanks will be open In the shade 12 hours The cleaning tank, the replacement of a tank of water
Bright lights, no wind, no fog	Water tank water level too high	Will pour out some water in the sink, tighten the cover.
Spray a small amount	Transducer scaling Dirty water or storing for a long time	Cleaning transducer Replacement of the cleaning water

Product structure



Basic parameters


Rated voltage: 220V~ 50Hz
Rated power: 25W
Tank capacity: 2.5L
Maximum evaporation: 180-200ML/H
Noise: ≤35dB



Simple operation

Place the machine horizontally in a suitable place, take out the top cover, pick up the water tank and take out the sponge pad under the float of the machine base. Add water to the machine base directly or lift the water tank to add water, inject pure water or clean tap water. Connected to the AC 220V/50Hz power supply, the power light is "red", indicating that the water tank is filling the water tank. When the "green" light is on, it indicates that the water in the water tank is full and the machine can work normally. At this time, turn the fog amount adjustment knob to change the amount of spray, which can be adjusted according to the dry condition of the room. When the water tank is not water, the built-in installation device will automatically disconnect the atomization circuit. At this time, the mist exits without fog. At the same time the red indicator lights up. If you continue to use it, turn off the power and refill the water tank. (as shown in Figure 2 and Figure 3)

Operation of adding water

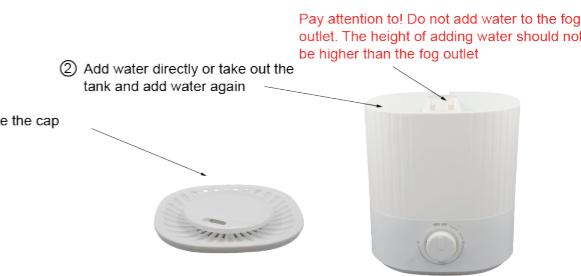

Operation note

1. Must not be to the water tank and the tank is added with 40°C above the water, in order to avoid discoloration or deformation.
2. Do not let water from the outlet flow of human bldy. The outside of the body of water, use a cloth to clean the.
3. In the indoor temperature at 0°C dry circle, please will sink and water in the water poured out, so that the water freezes, result in damaging components.

WARRANTY CARD

Dear customer:

Thank you for your purchase of the company's products, in order to protect your rights, please keep the warranty card, such as quality issues please contact the local dealer.

Name: _____ Model: _____

Purchasing address: _____

Telephone: _____ Date of purchase: _____

Address: _____

Matters needing attention

- 1) since the date of purchase please users enjoy one year repair service, please directly with the dealer to negotiate.
- 2) other parts such as the consumption of materials not under warranty.
- 3) repair, please present this card and proof of purchase or invoices effective.

Non warranty

- 1) Careless use or error caused harm.
- 2) the warranty card is lost or damaged.

IMPORTER:

ECE TIBBI CIHAZLAR VE MEDIKAL SAN. TIC. A.Ş.

Address: Maltepe Mahallesi. Hastane Yolu Sokak. No:6
Zeytinburnu/İstanbul.

Phone: 444 7896

Web: www.ecemedikal.net

www.respirox.com.tr

Maintenance and cleaning

Before cleaning, please be sure to cut off the power, pulling a plug.

Tank cleaning (two to three weeks time)

Unscrew the cap, just a soft cloth to clean the tank man scale, with Shimizu Kiyoshi.

Tank cleaning aid (Monday times)

If the tank scale, use a soft cloth dipped in cleaning agent or white vinegar wash, and rinse with water.

External cleaning humidifier

The flexible cloth is below 40°C warm rinse, dry surface stains, the spray nozzle can wash water.

The humidifier collection

The need to clean, dry, returned to the original packaging and stored in dry place.

Warning

Never use the sharp apparatus to touch oscillating transducer, can use soft clean cloth.

Cannot be used with chemical solvents, petrol, kerosene to clean surface.

Don't use detergent to clean. The best use of clean water.

When cleaning, to avoid the water in the water, in order to avoid internal electrical parts wet, malfunction.

Do not use removable body component.