

## MANUEL TEKERLEKLI SANDALYE

Model: RMTS-03



### KULLANIM KILAVUZU

Yayın Tarihi: 18.03.2024

#### 1. Ürüne Genel Bakış

Bu tekerlekli sandalye, güvenli ve rahat bir hareket kabiliyeti çözümü sağlamak amacıyla sınırlı hareket kabiliyetine sahip kişiler için özel olarak tasarlanmıştır. Bu kılavuz aracılığıyla tekerlekli sandalyenin ana fonksiyonlarını, çalıştırma yöntemlerini, güvenlik önlemlerini ve bakım yöntemlerini öğreneceksiniz

## 2. Ürün Özellikleri

1. Katlanabilir tasarım
2. Hafif ve taşınması kolay
3. Tekerlekli sandalyenin sağlam ve dayanıklı olmasını sağlayan, yüksek mukavemetli malzemelerden yapılmıştır.
4. Fren sistemi, sürüş güvenliğini sağlar.
5. Konforlu koltuk minderi ve sırt desteği daha iyi bir sürüş deneyimi sağlar.

## 3. Operasyon Rehberi

### ① Tekerlekli sandalyenin açılması :

Tekerlekli sandalyeyi katlanmış durumdan çıkarın ve tüm parçaların sıkı bir şekilde bağlandığından emin olun.



### ② Tekerlekli sandalyenin katlanması :

Pedalı yukarı çevirin, koltuk minderinin her iki tarafındaki el kayışlarını iki elinizle tutun ve yukarı kaldırın; tekerlekli sandalye katlanabilir.



### ③ Tekerlekli sandalyenin kullanımı:

Kalçalarınızı koltuk minderinin üzerine yerleştirin ardından konfor ve denge sağlamak için sırtlığın açısını ayarlayın.

### ④ Tekerlekli sandalyenin çalıştırılması

Kolçakları iki elinizle tutun, ayaklarınızı pedalların üzerine koyun ve tekerlekli sandalyeyi kuvvetle ileri doğru itin.

## Ayak pedalının yüksekliğinin ayarlanması



Cıvataları gevşetmek için bir tork anahtarı kullanın, ayak pedalı konumunu istediğiniz gibi ayarlayın ve ardından cıvataları sıkın.



Cıvataları gevşetmek için bir iç altıgen anahtar ve bir torx anahtarı kullanın, cıvataları dışarı çekin, ayak pedalı deliği mesafesini kurulum konumuna ayarlayın ve ardından cıvataları sıkın.



## ⑤ Fren kullanım talimatları



1. Kullanıcı araca binerken veya araçtan inerken fren kullanmalıdır. Fren kolunu tutun ve ileri veya geri çekin. Kilitleme sonrasında kullanıcı araca binebilir veya inebilir.

Not: Yokuş aşağı inerken tekerlekli sandalyeyi frenlemek için frenleri kullanmamaya dikkat edin, aksi takdirde devrilme riski doğar.



2. El frenini kullanırken, fren kolunu iki elinizle tutmalı ve frenin sıkılığını ayarlamak veya tekerlekli sandalyenin hızını kontrol etmek için kavramanın sıkılığını ayarlamalısınız.

#### ⑥ Geri katlama işlevi ve emniyet kemeriyle ilgili talimatlar




1. Geri katlama fonksiyonu, tekerlekli sandalyeyi dar bir alanda katlamak için kullanılır. Kolu iki elinizle bastırın ve katlamak için itme kolunu geriye doğru çekin. Açarken, etkili bir şekilde kilitlemek için itme kolunu doğrudan yukarıya doğru çekin.



2. Emniyet kemerini kullanmak için öncelikle emniyet kemeri tokasını açın. Kullanıcı araca bindikten sonra emniyet kemeri uzunluğunu uygun şekilde ayarlayın ve tokayı kilitleyin.

#### 4.Çalışma şartları

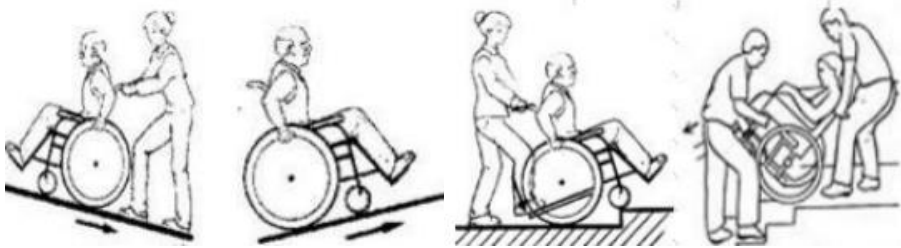

1. Tekerlekli sandalyeyi düz bir yolda veya kapalı alanda kullanmanızı öneririz. Özel durumlarda tekerlekli sandalyeyi kötü hava koşullarında açık havada kullanmaktan kaçının. Kötü hava koşullarının önüne geçilemiyorsa tekerlekli

sandalye kullanıldıktan sonra kullanıma uygun, korunaklı bir yer bulmanızı öneririz.

2. Çamurlu, karlı yollar, kumlu yollar, çakıllı yollar, çukurlu ve engebeli yollar vb. gibi kötü yollarda araç kullanmaktan kaçının. Yoğun trafik hacmine sahip yollarda yukarıdaki yolları kullanmaktan kaçının ve uzun süreli olarak neme maruz kalmaktan kaçının. Lastiğin daha hızlı yaşlanmasını önlemek için kavurucu güneş. Veya patlak bir lastik.

3. Tekerlekli sandalyeyi yolda kullanırken trafik güvenliği kurallarına uyulmalıdır. Kaldırımlarda ve yaya geçitlerinde yürüyün.

4. Lütfen yüksek merdivenleri geçmekten kaçının. Karşıdan karşıya geçmeniz gerekiyorsa bu, hemşire personeli tarafından yapılmalıdır.

5. Tekerlekli sandalyeyi kullanmıyorsanız rüzgar, yağmur ve sisten kaçınmak için doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın. Serin ve kuru bir yerde saklanması, üzerine uzun süre ağır cisimler konulmaması tavsiye edilir.

### **5.Güvenlik Önlemleri**

1. Kullanmadan önce lütfen tekerlekli sandalyenin tüm parçalarının sağlam olup olmadığını kontrol edin. Herhangi bir hasar varsa lütfen zamanında onarın;

2. Lütfen tekerlekli sandalye kullanırken dengenizi koruyun ve ani dönüşlerden veya ani frenlerden kaçının;

3. Lütfen rampalarda, merdivenlerde ve diğer karmaşık arazilerde dikkatli sürün ve gerektiğinde yardım isteyin;

4. Tekerlekli sandalyeye zarar vermemek veya kullanım güvenliğini etkilememek için lütfen aşırı yüklemeyin;

5. Acil durumlarda lütfen profesyonel bakım personeliyle iletişime geçin veya zamanında başkalarından yardım isteyin.

### **6. Bakım**

1. Lekeleri ve çizikleri önlemek için tekerlekli sandalyenin yüzeyini düzenli olarak temizleyin;

2. Tekerlekli sandalyenin her bileşeninin bağlantılarının sıkı olup olmadığını kontrol edin. Herhangi bir gevşeklik varsa lütfen zamanında sıkın;

3. Deri enfeksiyonunu önlemek için koltuk minderleri ve sırtlıkları temiz tutulmalıdır;

4. Tekerlekli sandalyenin hasarlı veya arızalı olduğu tespit edilirse, zamanında onarım için lütfen profesyonel bakım personeliyle iletişime geçin.



**ECE TIBBİ CİHAZLAR VE MEDİKAL SAN. TİC. A.Ş.**

Cihangir mah. Kemal Türkler Sok. No: 5/1 Avcılar/ İSTANBUL

[www.respirox.com.tr](http://www.respirox.com.tr) / [www.ecemedikal.net](http://www.ecemedikal.net)

444 78 96